


Appareil de massage avec 4 têtes de massage (Bleu/Blanc)



MANUEL D'INSTRUCTION

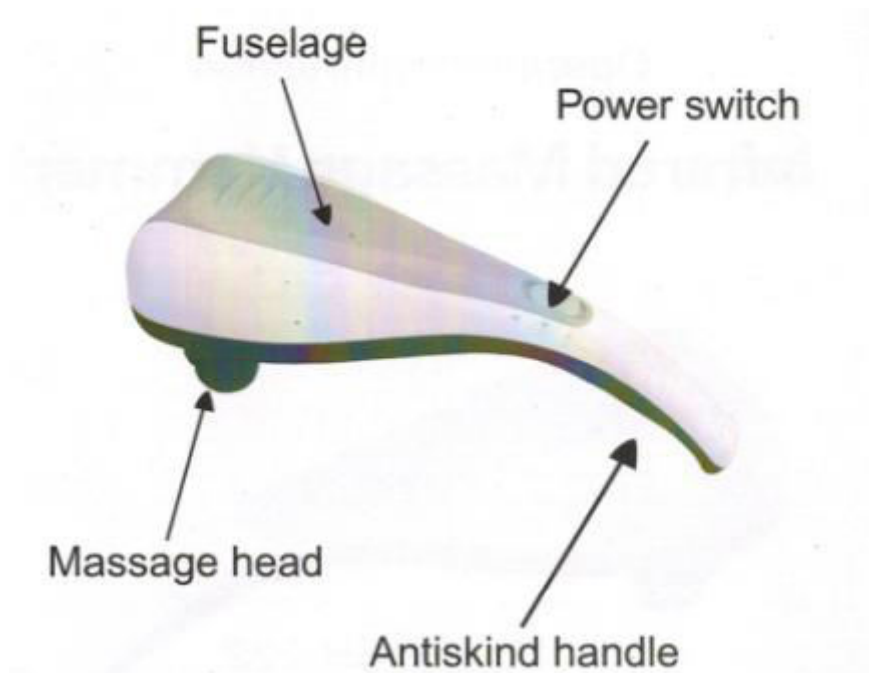

Nom	Appareil de massage à 2 têtes
Modèle	SH-222 SH-222 A
Alimentation	200-240V
Fréquence	50-60 Hz
Fréquence de vibration	Haut 32 fois par minute Bas 26 fois par minute
Puissance	≤28W

Fonctions du produit

1. Avant de pouvoir utiliser en mouvement, évitez les exercices d'échauffement et les blessures physiques.
2. Favoriser la circulation sanguine.
3. Soulage les muscles serrés et soulage la pression.
4. Massage intense pour différents tissus musculaires, massage complet, ainsi que shujie serré, exercer le muscle et éliminer le stress, afin de réaliser l'effet de mou.
5. Aide à soulager la douleur, l'enflure et à améliorer la flexibilité des tissus tendres et musculaires.
6. Aide à soulager les muscles tendus.
7. Utiliser cet appareil à massage après le sport aidera plus rapidement à soulager les muscles serrés et éliminer la fatigue.

Méthodes d'utilisation

1. Insérez l'alimentation en sécurité dans la prise de courant.
2. Un commutateur pour choisir leur force de massage, l'interrupteur poussé en avant correspond à la vitesse supérieure, en arrière la plus faible.
3. Peut être fixé dans un massage, peut masser, les mains et favoriser le poids de l'aile, la force de massage de ventilateur. Chaque massage ne doit pas durer plus de cinq minutes.
4. Après utilisation, s'il vous plaît boire une tasse de bouillie chaude afin de favoriser le métabolisme.
5. Utilisez propre avant et après doit tirer pour brancher.

Remarque

1. Les femmes enceintes et autres graves maladies.
2. Ne pas utiliser ou conserver dans des endroits humides.
3. Évitez l'utilisation continue de longue durée sur les muscles, pour moins de risques.
4. En cas de problème, veuillez contacter les fournisseurs et couper l'alimentation, veuillez démonter la réparation.
5. Jamais dans les yeux ou dans d'autres zones sensibles.
6. Le temps de démarrage continu ne doit pas dépasser 15 minutes.

CORPS HUMAIN

Mental fatigue : fatigue mentale

Colds : rhume

Cervical spondylosis : Spondylose cervicale

Hypertension : Hypertension

Lose eye : Perte de vue

Increased energy : Énergie accrue

Spermatorrhea premature ejaculation impotence : Spermatorrhée éjaculation précoce impuissance

Sex apathy : Apathie sexuelle

Hemprroids : Hémoroïde

Lower arthritis : Arthrite inférieure

Felt fine : Se sentir bien

Asthma : Asthme

Arm numbness : Engourdissement des bras

Periarthritis : Périarthrite

Stomach : Estomac

Acute or chronic back pain : Douleur dorsale aiguë ou chronique

Chest knee fatigue : Fatigue au genou

Diarrhea, constipation : Diarrhée, constipation

Sciatic nerve pain : Douleur du nerf sciatique

Nocturia disease : Maladie de Nocturia

