

MANUEL D'UTILISATION

Matelas de massage électrique, avec fonction de chauffage.


Aperçu des points forts:

- S'utilise aussi bien en position assise que couchée
- Matelas doux et confortable
- Télécommande
- Finitions soignées
- 9 modes de fonctionnement préprogrammés
- 4 zones de massage : épaules, haut du dos, bas du dos et jambes)
- Sangles de fixation
- Matelas complet (des pieds à la tête)

FONCTIONNEMENT DE LA MANETTE

Le matelas de massage est équipé d'une manette facile à utiliser, permettant le massage de 4 zones du corps. Elle permet également l'utilisation des fonctions de chauffage et de relaxation.

- Pour activer une zone de massage, faites glisser l'interrupteur jusqu'à la position souhaitée HI (Haut) ou LO (Bas).
- Vous pouvez activer la zone de massage ou une zone combinée en même temps.
- Les voyants DEL indiquent les zones sélectionnées.

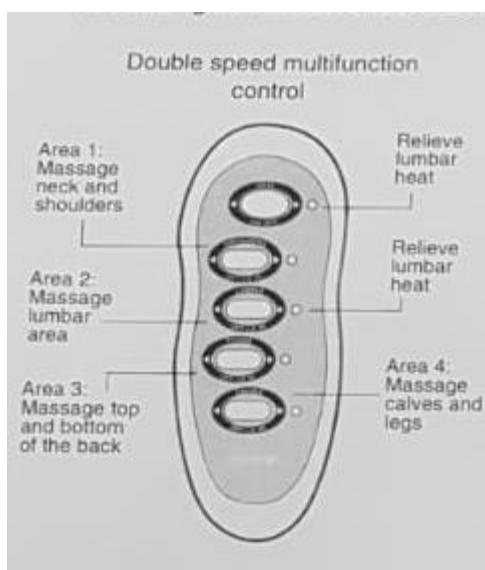

Télécommande multifonction à double vitesse

Area 1 : Massage cou et épaules
Area 2 : Massage des lombaires
Area 3 : Massage du haut et bas du dos
Area 3 : Massage des mollets et des jambes

Relieve lumbar heat : Chaleur pour le soulagement des lombaires.

1. Zones de massage:

Area 1 : Massage cou et épaules

Area 2 : Massage des lombaires

Area 3 : Massage du haut et bas du dos

Area 3 : Massage des mollets et des jambes

- Eteindre l'appareil en faisant glisser le bouton de massage en position OFF (Arret) avant de retirer l'adaptateur secteur AC de la prise murale.
- Pour activer la fonction de chauffage, appuyez sur le bouton de chauffage rouge. Pour éteindre le chauffage, appuyez à nouveau sur le bouton de chauffage. Le voyant DEL s'allume lorsque le mode de chauffage est en marche.
- Pour éteindre, mettre les boutons de contrôle sur la position OFF (Arret), puis retirez l'adaptateur secteur de la prise murale.

ADAPTATEUR SECTEUR MURAL

- Pour allumer le matelas de massage, brancher le cordon d'alimentation CA à la partie inférieure du contrôleur.
- Assurez-vous que tous les boutons de commande sont en position d'arrêt avant de brancher l'adaptateur secteur dans la prise murale.
- Activer et faire glisser les boutons de commande sur la position haute (haute) ou basse (basse).
- Déconnectez et mettez les boutons de commande sur OFF (Arret), puis débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.

SANGLES ELASTIQUES

- Placez le matelas de massage sur votre fauteuil préféré et fixez-la fermement à l'aide de sangles élastiques. Vous pouvez également régler le coussin avec la sangle élastique pour relever votre cou et vos épaules pour un massage relaxant.
- Le matelas réversible peut être recouvert à l'aide des sangles élastiques pratiques, et permettent également d'enrouler le matelas, facilitant ainsi un transport et rangement facile.

INSTALLATION DU MATELAS DE MASSAGE

- Retirez le contenu: Le matelas de massage recouvre le contrôleur manuel, l'adaptateur secteur, l'adaptateur de voiture et le manuel d'instructions.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit
- Placez la housse de massage sur le canapé, sur le lit ou sur le sol. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser le matelas de massage sur une surface douce. Utiliser le matelas de massage sur une surface dure serait inconfortable et pourrait créer des bruits indésirables.
- Assurez-vous que les commutateurs sont en position OFF (ARRET) avant de connecter la prise de l'adaptateur secteur au mur 120V.
- Pour débrancher, placez toutes les commandes en position OFF (Arret), puis débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Toujours débrancher de la prise murale immédiatement après son utilisation ou avant son nettoyage.
- Ne tenez pas le dispositif incliné qui tomberait dans l'eau. Déconnecter immédiatement.
- Ne pas utiliser pour prendre un bain ou une douche
- Ne placez ou ne stockez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber, comme par exemple un évier.

- Ne pas mettre le matelas dans de l'eau ou dans d'autres liquides.

PRECAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas utiliser sous une couverture ou un coussin.
Il peut surchauffer et causer un incendie important, un choc électrique ou des blessures à une personne.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est doté d'une fiche et d'un cordon électrique endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il tombe au sol et a été endommagé ou est tombé dans l'eau.
- Gardez l'appareil loin des surfaces chauffées
- Ne pas utiliser à l'extérieur
- Ne jamais mettre ou insérer un objet dans l'ouverture
- Ne soyez pas dans un endroit où des produits en aérosols (Sprays) sont utilisés ou où l'oxygène a été administré
- Utiliser la surface chauffée avec précaution. Cela peut créer des bourses sérieuses. N'utilisez pas la surface chauffée sur une plaie ou en cas de

mauvaise circulation sanguine. L'utilisation non supervisée de l'appareil de chauffage par les enfants ou les personnes handicapées sera dangereuse

- Pour déconnecter, mettez tous les boutons en position OFF (ARRET) et débranchez la fiche de la prise.
- Ne l'utilisez jamais dans votre sommeil et ne dormez pas lorsque le produit fonctionne.
- Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine vendu avec le périphérique.

ATTENTION, NE PAS UTILISER DANS LES CAS SUIVANTS:

- si vous avez des problèmes de santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- Ne laissez pas le matelas de massage fonctionner sans surveillance, surtout en présence d'enfants
- Ne vous endormez pas lorsque vous utilisez le masseur
- le massage doit être confortable et agréable. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort après l'utilisation, arrêtez d'utiliser ce produit et consultez votre médecin.
- Ne mettez pas la commande manuelle sous le siège
- Évitez d'utiliser une rallonge, car elle risque de surchauffer et de provoquer un incendie.
- Ne sautez pas ou ne tombez pas brusquement sur ce produit
- Ne pas utiliser ce produit avant d'aller au lit. Le massage peut créer un effet stimulant et retarder le sommeil
- Ce produit ne doit pas être utilisé par une personne présentant un problème de santé pouvant limiter la capacité de l'utilisateur à utiliser la manette.
- Ne pas utiliser ce produit directement sur une zone de peau gonflée ou enflammée, ni sur une zone de peau susceptible de subir des éruptions cutanées.
- Ne pas utiliser après avoir pris des analgésiques, des sédatifs et de l'alcool. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous prenez ces médicaments.
- S'il vous plaît consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de diabète
- Ne pas utiliser ce produit lorsque les veines

SOIN ET ENTRETIEN

- La maintenance du produit n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de pièces de rechange destinées à l'utilisateur
- Placez la garniture de siège dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil
- Ne pas accrocher l'appareil par le cordon électrique

- Gardez tout solvant ou détergent fort à l'écart
- Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Essuyer avec un vêtement doux et un peu humide
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de pinceaux, d'essence, de kérosène, de cire pour meubles ou de verre, ni de diluant à peinture pour nettoyer le matelas de massage.
- Appliquez régulièrement une peau de mouton imitation avec une brosse douce et passez l'aspirateur de temps en temps
- Si le matelas est humide, séchez-le seulement à l'ombre
- Ne pas laver dans la machine ou nettoyer à sec