


Masseur Dauphin

Relaxant -contre la cellulite

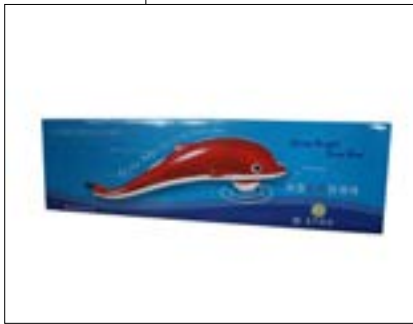

Manuel de l'utilisateur

Il est recommandé de lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

FR

CARACTERISTIQUES

Masseur infrarouge : notre tête de massage comprend quatre fonctions innovantes : rayon infrarouge, traitement par la chaleur, thérapie magnétique et massage par pression. Les rayons infrarouges ont une action directe sur la surface de votre corps, et si combinés avec la chaleur, le résultat du massage ne sera que plus apparent. Un champ magnétique puissant peut renforcer les vaisseaux sanguins et améliorer le métabolisme. La tête de massage est faite en plastique de haute technologie ce qui permet d'obtenir des pressions plus fortes et le système d'ajustement de vitesse instantané vous permet de choisir la vitesse que vous désirez.

REGLES D'UTILISATION

- Appliquez le masseur en poussant le bouton afin d'allumer l'indicateur lumineux.
- La vitesse du massage peut être ralentie grâce au bouton de réduction de la vitesse.
- La vitesse du massage accélérera en appuyant sur le bouton d'augmentation de la vitesse.
- Il est possible de juguler la pression du masseur en utilisant le bouton central.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Débranchez l'appareil après usage et avant nettoyage
- Ne pas utiliser dans un endroit humide
- Soyez vigilants quand l'appareil est utilisé par des enfants ou des handicapés
- Ne réparez pas vous-même en cas de problème, cessez de l'utiliser et contactez le franchiseur le plus vite possible.

POSITIONS DE MASSAGE



Epaules

Bras

Dos

Jambes

Pieds


| | |
|---------------------|----------------|
| Tension d'entrée | AV220V 50Hz |
| Puissance nominale | 28W |
| Niveau de sûreté | |
| Note d'isolation | E |
| Temps d'utilisation | Quinze minutes |

| Résolution des problèmes de fonctionnement | | |
|---|--|--|
| Problème | Cause | Solution |
| Le moteur ne fonctionne pas | La prise est mal branchée | Rebranchez correctement |
| | L'interrupteur n'est pas sur en position de fonctionnement | Vérifier la position de l'interrupteur |
| Ne fonctionne pas après une utilisation prolongée | Surchauffe | Arrêtez l'appareil pendant 30 minutes |

| Garantie | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Nom du client | | Tel | |
| Adresse du client | | | |
| Date d'achat | | Tampon du franchiseur | |
| Date limite de garantie | | | |

Merci pour votre achat. Afin de vous aider à l'utiliser correctement, nous vous conseillons de lire cette notice avant tout emploi, en prêtant particulièrement attention aux consignes de sécurité. Ce mode d'emploi doit être conservé.

Fatigue
 Rhume
 Douleur aux cervicales
 Hypertension
 Insomnie
 Récupération d'énergie
 Impuissance éjaculation précoce
 Problèmes sexuels
 Hémorroïdes
 Arthrite au niveau des jambes

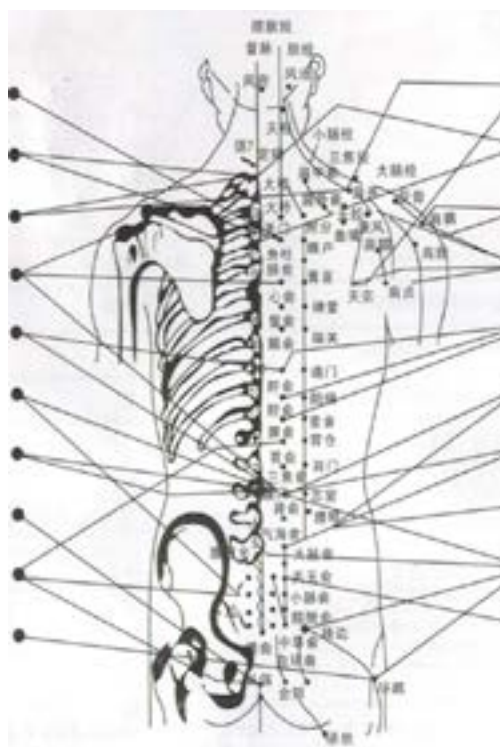

Nuque raide
 Asthme
 Bras engourdis
 Périarthrite des épaules
 Maux d'estomac
 Douleur aigue ou chronique des muscles
 Fatigue de la poitrine et des articulations
 Diarrhée et constipation
 Sciatique
 Incontinence

OuMeng CE An QuanRenZheng

Pass ISO9001 : 2000 International Quality Authentic System