

# Manuel d'utilisation

*Masseur vibrant pour pieds/jambes*



Merci pour votre achat. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil, et le garder toujours à portée de l'appareil.

## Informations sur le produit

Voltage : 110-240V

Puissance : 80W

Durée du massage : 15 minutes


## Caractéristiques

1. Un tout nouveau produit de massage spécifiquement conçu pour masser vos pieds, vos chevilles et vos mollets en même temps.
2. 4 disques flexibles de palpations dans un seul appareil pour masser vos pieds, vos chevilles et vos mollets.
3. Ces disques vous permettent d'obtenir une expérience de massage professionnelle.
4. Ces outils de palpation permettent un massage qui pénètre en profondeur dans vos muscles des pieds, des chevilles et des mollets.
5. Les points de pression en dessous de vos pieds stimulent vos réflexes sur la plante de vos pieds.
6. Vous pouvez personnaliser votre massage grâce aux trois programmes de massage par palpation et aux trois modes de vibration.
7. La combinaison synergique entre la palpation et la vibration vous offre une expérience de massage plus relaxante et plus revitalisante.
8. La position stratégique des boutons de contrôle vous permettent de changer de programme facilement.
9. Une fonction arrêt automatique est incluse après 15 minutes d'utilisation.
10. Une paire de tissu détachable pour un nettoyage plus facile.
11. Ajouter à cela une fonction chauffante (un bouton On/Off est disponible à l'arrière du dispositif de massage).

## Les bienfaits


1. La palpation et la vibration appuient en profondeur sur les différentes parties de vos muscles des pieds, des chevilles et des mollets.
2. Un massage par palpation et vibrations vise les points de réflexe de vos pieds et de la plante des pieds.
3. Stimule la circulation du sang, réchauffant ainsi les muscles.
4. Soulage efficacement les pieds endoloris et fatigués.
5. Permet une relaxation complète du corps.

## Nom des pièces et fonctionnalités

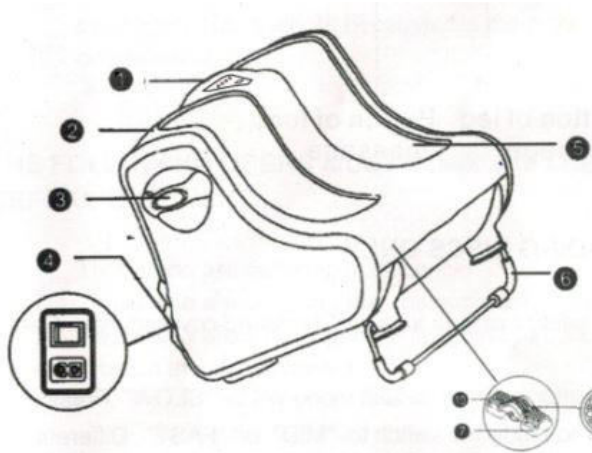

1. Tableau de commande
2. Coque du produit
3. Poignée
4. Bouton On/Off (noir)
5. Enveloppe en tissu
6. Support
7. Sous-ensemble
8. Boule de roulement
9. Aimant
10. Partie chauffante

## Explication du tableau de commande

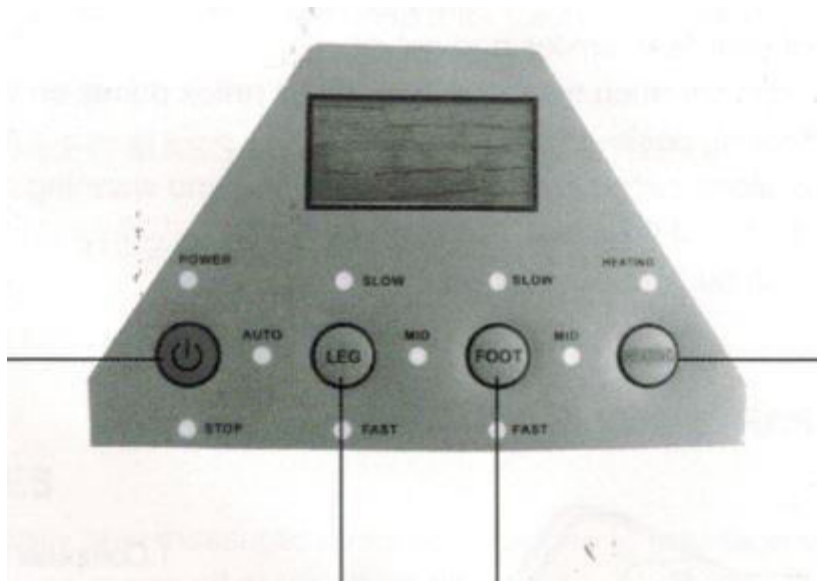

Bouton Auto/Stop

Bouton chauffage

Bouton massage  
des jambes

Bouton massage  
des pieds

## **Pour activer seulement les disques de palpation**

1. Mettez le bas de vos jambes dans l'emplacement en tissu prévu à cet effet.
2. Appuyez sur le bouton « LEG » (jambes) et le mode par défaut sera « Lent ». Appuyez une nouvelle fois, ou deux fois, et le mode passera à « Moyen » puis « Rapide ». Pour chaque niveau, le mode de palpation est différent.
3. Appuyez sur le bouton « FOOT » (pied) et le mode par défaut sera « Lent ». Appuyez une nouvelle fois, ou deux fois, et le mode passera à « Moyen » puis « Rapide ». Pour chaque niveau, le mode de palpation est différent.
4. Appuyez sur « HEATING » pour débiter la fonction de chauffage et ressentir les effets du chauffage.

## **Sécurité**

1. Ne pas vous tenir debout dans l'appareil ou y exercer une forte pression durant le massage. Cela réduirait significativement la puissance du moteur ou pourrait l'arrêter complètement. Le produit pourrait surchauffer et causer des dommages irréversibles à l'appareil.
2. La durée d'usage totale recommandée est de 15 minutes de massage
3. Appuyez sur « STOP » pour arrêter le massage si vous ressentez de l'inconfort. Les 4 paires de disque ne vont pas s'arrêter instantanément ; ils vont réaliser jusqu'au bout leur dernier cycle de palpation. Avant de s'arrêter à leur position initiale.
4. Vous pouvez ressentir des picotements dans les pieds pendant et après l'utilisation. Cette sensation est normale car votre circulation du sang sera activée.

## **Les utilisateurs suivant doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit**

1. Ceux souffrant de cancer.
2. Ceux souffrant d'ostéoporose
3. Ceux souffrant de tumeurs malines
4. Les femmes enceintes.

## **Conditions pour lequel l'appareil de massage ne doit pas être utilisé**

Dans les cas suivants, veuillez éteindre immédiatement l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation de sa prise.

1. Si de l'eau tombe accidentellement sur l'appareil, cela peut provoquer un choc électrique.
2. Si une douleur sévère et anormale est ressentie pendant le massage, arrêtez l'opération immédiatement et consultez votre médecin.
3. Si vous détectez un mauvais fonctionnement de l'appareil lorsqu'il est en route.
4. Si le câble d'alimentation est abimé. Cela peut causer de graves blessures.
5. S'il y a un fort orage.

## **Entretien de l'appareil**

Cet appareil de massage doit être seulement entretenu ou réparé par le service compétant. Les utilisateurs ne doivent pas démanteler ou essayer de réparer l'appareil eux même.