

Vibro Shape professional slimming
-
Ceinture amincissante professionnelle Vibro Shape

MANUEL D'UTILISATION



LE PACK COMPREND :

- 1 ceinture Vibro Shape
- 1 adaptateur AC
- 1 télécommande
- 1 manuel d'utilisation

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

La ceinture **Vibro Shape** est un produit de grande qualité qui au moyen de vibrations permet d'amincir et de tonifier les différentes parties du corps. Cela reproduit le traitement chiropratique conventionnel.

Ainsi, cela permet non seulement de raffermir les différentes parties du corps mais également d'évacuer le stress et d'améliorer la santé en général. La réponse idéale à un nouveau mode de vie plein de promesses !!!

-Permet l'activation des cellules graisseuses et le rejet des acides gras par le système lymphatique.

-Favorise une bonne digestion, l'élimination des toxines et facilite l'assimilation des aliments.

-La diffusion de chaleur permet d'activer le flux sanguin pour une bonne circulation.

-Tonifie et raffermi la plupart des groupes de muscles, cela permet ainsi d'améliorer la condition physique et de traiter certaines blessures légères.

- Masse et stimule les muscles profonds comme les abdominaux qui favorise l'équilibre et la mobilité du corps.

AVERTISSEMENTS

-N'utilisez pas la ceinture si vous êtes enceinte.

-Si vous suivez un traitement particulier, consultez votre médecin avant toute utilisation.

-Cessez immédiatement d'utiliser la ceinture si des effets indésirables se manifestent.

-Débranchez la ceinture si vous ne l'utilisez pas.

-Ne démontez ou ne tentez pas de réparer le produit.


-N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.

-N'utilisez jamais de cordon, fiche d'alimentation ou de prise de courant endommagés.


-N'utilisez pas le produit dans un environnement chaud ou humide

LE PACK COMPREND :

- La ceinture Vibro Shape
- Une télécommande
- Un adaptateur AC
- Une notice d'utilisation

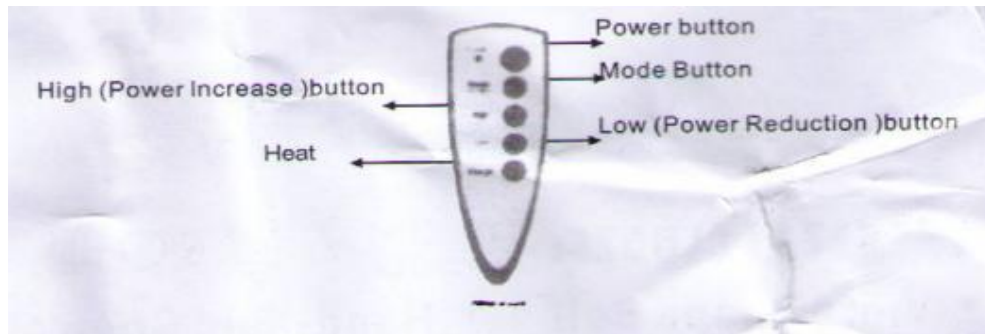

- "Power" button: Bouton « MARCHE/ARRET »
- « Mode » Button : Bouton « MODE »
- « High » (Power Increase) button : Bouton « HAUT », augmentation de la puissance
- « Low » (Power Reduction) button : Bouton « BAS », baisse de la puissance
- « Heat » : « Fonction chaude »

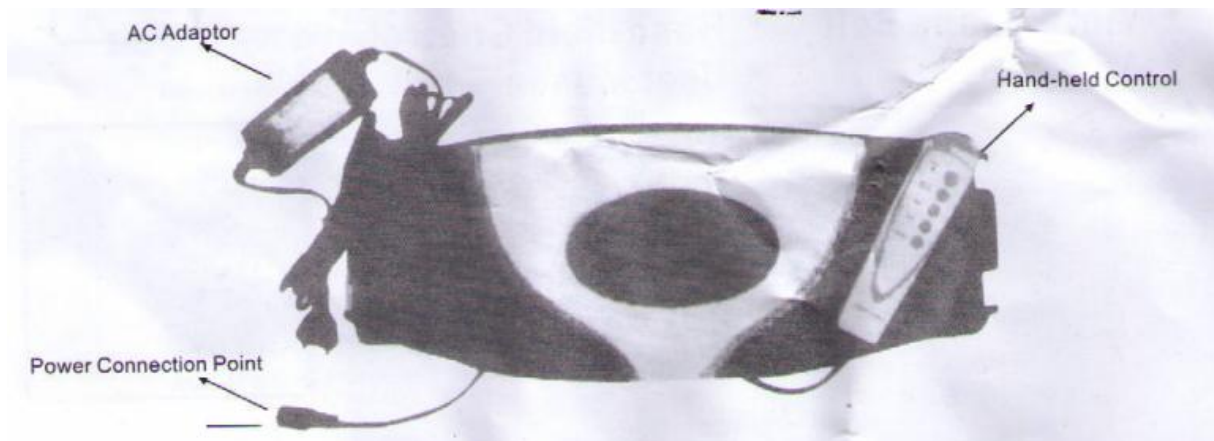

- AC Adaptor : adaptateur AC
- Power Connection Point : fiche de connexion
- Hand-held Control : télécommande

CARACTERISTIQUES

- *Mode automatique
- *Mode manuel
- *5 niveaux
- *Fonction chaude (entre 31 et 65°C)
- *Mouvement dans le sens et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- *Fonction arrêt automatique au bout de 10 minutes.

FONCTION DES BOUTONS

- *Changer de mode – Appuyez sur le bouton « MODE » pour passer d'un mode à l'autre.
- *Ajuster le niveau- Appuyez sur le bouton « HIGH »/« HAUT » ou « LOW »/ « BAS » pour régler le niveau désiré.

*Régler les mouvements de rotation – Appuyez sur le bouton directionnel pour choisir des mouvements dans le sens ou dans les sens inverse des aiguilles d’une montre (uniquement valable pour le mode manuel).

* Allumer/éteindre l’appareil – Appuyez sur le bouton « POWER » / « MARCHE-ARRET »


PRECAUTIONS D’EMPLOI

1. Enroulez la ceinture autour de la partie du corps que vous souhaitez traiter.
2. Branchez l’adaptateur AC à la fiche de connexion de la ceinture.
3. Branchez l’adaptateur à la prise de courant après vous être assuré que le voltage de celle-ci est bien compatible avec l’adaptateur. Une fois branché, une lumière verte apparaît sur la télécommande.
4. Appuyez une fois sur le bouton « POWER » / « MARCHE » pour allumer l’appareil. La ceinture fonctionnera alors en mode automatique sauf si vous appuyez sur le bouton « MODE » pour passer en mode manuel.

MODE AUTOMATIQUE (voyant vert)


La ceinture fonctionnera automatiquement à partir du niveau 2 et effectuera un cycle complet. Utilisez les boutons « HIGH »/ «HAUT » – « LOW »/ « BAS » pour déterminer le niveau de démarrage.

Niveau minimum = 1 / Niveau maximum = 5

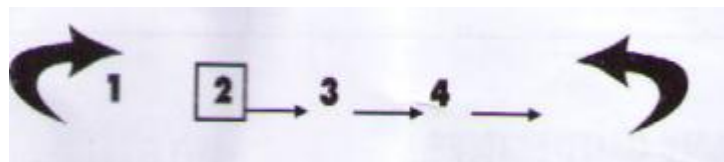

MODE MANUEL (voyant rouge)

La ceinture commencera à fonctionner à partir du niveau choisi. Utilisez les boutons « HIGH »/ « HAUT » – « LOW »/ « BAS » pour passer d’un niveau à l’autre.

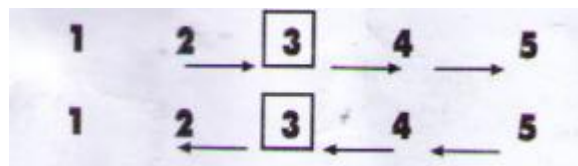

5. Lorsque vous appuyez sur le bouton « HIGH » / « HAUT » ou « LOW » / « BAS », un signal retentit. Si aucun signal ne retentit, vous avez atteint le niveau maximum.

6. Appuyez le bouton « MODE » pour changer de mode.
7. En mode manuel, le bouton directionnel peut être utilisé pour alterner entre des rotations dans le sens ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
8. En fonctionnement, la ceinture diffuse une température entre 31 et 65°C. La température change toutes les minutes. Deux systèmes de ventilation situés sur le dessus de la ceinture évitent la surchauffe.
9. La ceinture peut être éteinte à tout moment. Sinon un minuteur automatique intégré arrête automatiquement la ceinture après 10 minutes de fonctionnement.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- En utilisation normale, la ceinture et l'adaptateur vont chauffer.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas / Ne le laissez pas branché.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Rangez toujours l'appareil dans le sac de voyage fourni.
- Stockez la ceinture dans un endroit frais et sec.
- N'exercez pas de pression ou ne placez pas des choses lourdes sur le dessus de l'appareil.
- Enlevez la poussière et les tâches avec un chiffon et un détergent doux lorsque l'appareil est éteint et totalement froid.

DONNEES TECHNIQUES

DENOMINATION	Vibro Shape
MODELE N°	MC0138
ENTREE	AC220V-240V 50Hz
SORTIE	DC24V
PUISSANCE	55 W

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

- Ne perforez pas le boîtier du produit
- Utilisez uniquement l'appareil avec l'adaptateur fourni par le fabricant :

Modèle n° : GPE601

Entrée : 100-240V-1.5A

Sortie : DC 240V-2.0Amax

Lisez attentivement la notice d'utilisation du produit avant la première utilisation.
Merci de renvoyer le produit au fabricant pour tout problème de fonctionnement.

Fabriqué aux USA